


Conditionnement des enfants– Logiciel VRA (Visual Reinforcement) Viewer

- › Système insolite et simple d'utilisation pour le conditionnement des enfants pendant les examens audiométriques
- › Images et animations différentes selon la tranche d'âge .
- › Particularité principale: possibilité de diffuser des vidéos et de compléter la bibliothèque d'images
- › Installation simple et intégration d'un logiciel autonome dans le logiciel de l'audiomètre.
- › Utilisation simple pendant l'examen d'audiométrie vocale ou tonale, quel que soit l'audiomètre.
- › Adapté à tous les audiomètres informatisés du marché, en particulier de type AT1000 ou ear3.0-PED.

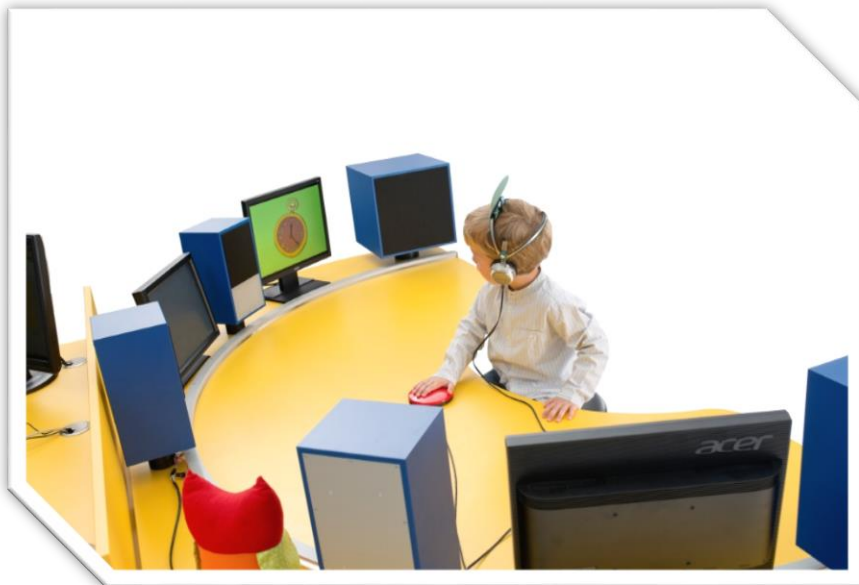

Logiciel de conditionnement – VRA Viewer

Les deux écrans plats se trouvent à gauche et à droite de la table à laquelle est installé l'enfant. Les images sont présentées par l'intermédiaire de l'audiomètre. Une carte graphique (dualhead) offre deux sorties vidéos supplémentaires.

La navigation vers l'écran de droite ou de gauche s'effectue par le curseur du clavier de l'audiomètre.

Le logiciel conçu spécialement pour le conditionnement des enfants permet de diffuser les images et vidéos souhaitées, dans un ordre quelconque.

Le format des images est un format usuel (bitmap, jpeg, vidéos mpeg).

*RENSEIGNEZ-VOUS EGALEMENT SUR LE SYSTÈME **LOOKY BOX**, CONCU POUR LES ENFANTS EN BAS AGE.*



Caractéristiques techniques

Détails du produit:

- Deux écrans 17" TFT
- Carte graphique Dualhead
- Logiciel de conditionnement VRA Viewer 2.0 AT
- Images de conditionnement (Mayence)
- Cable de branchement vidéo
- Installation et Montage

Options:

- Télécommande Infra rouge,
- Receiver IR
- Logiciel Infrarouge

